

# Enamelite® - Glasure Spray Fluorescente a Basso Punto di Fusione

## Fa brillare le ceramiche come mai prima d'ora!

**La glasura delle ceramiche dentali è diventata più rapida e più semplice da quando Enamelite si è preso l'impegno di ottenere questi risultati.**

La caratterizzazione del colore e la glasura degli elementi in ceramica integrale, possono essere un compito laborioso quando si utilizzano certi di tipi di glasure; con molte di queste le ceramiche devono essere cotte diverse volte per raggiungere risultati ottimali. Con Enamelite Fluorescent, a basso punto di fusione, in una sola cottura si possono ottenere risultati eccezionali.

La fluorescenza incorporata aiuta a eliminare risultati negativi, specie in presenza di particolari condizioni di luce. Enamelite Fluorescent è perfetto per tutte le ceramiche (come per es. e-Max) così come per la zirconia e il disilicato di litio.




### CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Caratterizza il colore ed effettua la glasura di elementi multipli in una sola cottura
- Non lascia strati fangosi ai margini
- Funziona su ceramica, zirconia e disilicato di litio
- La bomboletta può essere utilizzata per moltissime applicazioni
- Enamelite Fluorescent migliora l'estetica dei restauri e ne favorisce il mimetismo nella bocca del paziente, specie in presenza di luci particolari

### INFORMAZIONI PER ORDINARE

Bomboletta da 46 g

#5100181

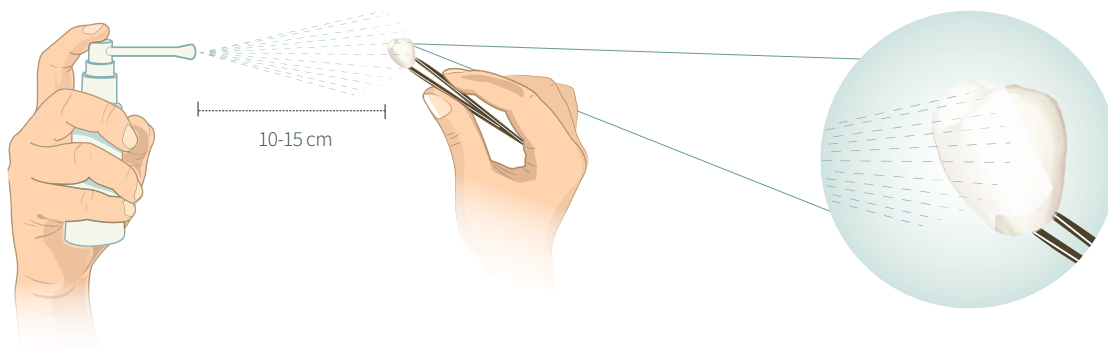

Tenere il restauro da glasare a 10-15 cm dall'ugello della bomboletta.  
Applicare dei brevi spruzzi di Enamelite tutto attorno al restauro.

Ultimata l'applicazione appare uno strato uniforme di colore bianco.  
Accertatevi che non si sia creato uno strato fangoso.

keystone®  
INDUSTRIES